



RÉFÉRENCE CLINIQUE RAPIDE

LONGUEUR DU CHÂSSIS DU FAUTEUIL ROULANT

Le choix de la longueur du châssis joue un rôle clé dans l'efficacité de propulsion, la stabilité, la maniabilité et l'ajustement global du fauteuil roulant.

CONSEILS CLINIQUES


- Les châssis plus courts conviennent souvent aux utilisateurs actifs qui privilégient l'efficacité et la réactivité.
- Les châssis plus longs peuvent être appropriés lorsque les besoins de stabilité ou de positionnement priment sur la maniabilité.
- Tenez toujours compte des mensurations, de l'environnement et des objectifs fonctionnels dans leur ensemble.

COMPARAISON RAPIDE

LONGUEUR DU CHÂSSIS	PROFIL DE L'UTILISATEUR	AVANTAGES CLINIQUES	CONSIDÉRATIONS CLINIQUES
• Châssis -1 ou -2 plus court par rapport au standard	• Utilisateurs de petite taille ou actifs • Environnements intérieurs restreints	• Roues arrière plus près du centre de masse • Efficacité de propulsion améliorée • Excellente maniabilité • Transport et rangement facilités	• Assurer la stabilité vers l'arrière • Peut limiter la profondeur d'assise ou le choix des composants • Affectera la position du client selon l'angle de châssis choisi
• Châssis standard	• La plupart des utilisateurs • Usage quotidien général	• Stabilité et maniabilité équilibrées • Options de configuration flexibles • Réglage indulgent/acomodant	• Configuration conçue pour un fonctionnement optimal
• Châssis +1 ou +2 plus long par rapport au standard	• Utilisateurs de grande taille • Longueur fémorale supérieure ne pouvant être soutenue par la profondeur d'assise • Besoin accru de stabilité	• Stabilité accrue vers l'arrière et l'avant • Espace supplémentaire pour le positionnement ou pour les roues/accessoires	• Maniabilité réduite • Effort de propulsion accru • Empreinte au sol globale plus grande • Affectera la position du client selon l'angle de châssis choisi

Pour les châssis pliants, consultez les incompatibilités à la fin du formulaire de commande des châssis pliants à la page 7

HELIO A6, A7, C2, MOVE

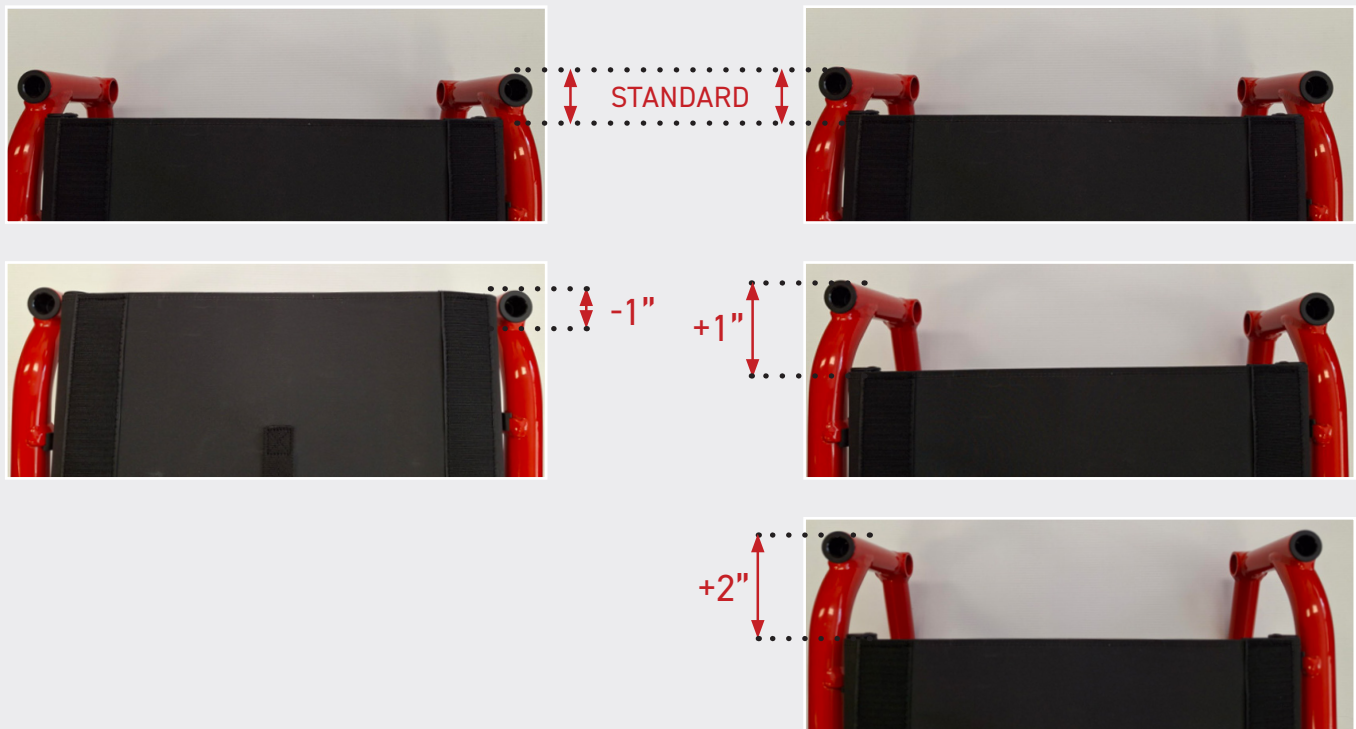

APEX C, APEX A, VELOCE

