INSTRUCTION D'INSTALLATION

ASSEMBLAGE MONTAGE HAUT

- Avant de débuter l'assemblage, assurez-vous d'avoir en main toutes les pièces nécessaires. Ces pièces doivent être commandées par l'intermédiaire de votre représentant ou par le service à la clientèle de Motion Composites. Ayez en main le numéro de série de votre fauteuil afin de faciliter la commande.


Materiel(s) requis:

- Palettes :
  - 0031025-00 • PALETTE COMPOSITE 6x6po - ASSY
  - 0031026-00 • PALETTE COMPOSITE 7x6po - ASSY
  - 0031027-00 • PALETTE COMPOSITE 8x6po - ASSY
  - 0031589-00 • PALETTE AJUST NEWTON COMP 5.5x8po, DROITE - ASSY
  - 0031590-00 • PALETTE AJUST NEWTON COMP 5.5x8po, GAUCHE - ASSY
  - 0031591-00 • PALETTE AJUST NEWTON COMP 6.5x8po, DROITE - ASSY
  - 0031592-00 • PALETTE AJUST NEWTON COMP 6.5x8po, GAUCHE - ASSY
  - 0031593-00 • PALETTE AJUST NEWTON COMP 7.5x8po, DROITE - ASSY
  - 0031594-00 • PALETTE AJUST NEWTON COMP 7.5x8po, GAUCHE - ASSY
  - 0031595-00 • PALETTE AJUST NEWTON ALU 4.5x8po, DROITE - ASSY
  - 0031596-00 • PALETTE AJUST NEWTON ALU 4.5x8po, GAUCHE - ASSY
  - 0031597-00 • PALETTE AJUST NEWTON ALU 5.5x8po, DROITE - ASSY
  - 0031598-00 • PALETTE AJUST NEWTON ALU 5.5x8po, GAUCHE - ASSY
  - 0031599-00 • PALETTE AJUST NEWTON ALU 6.5x8po, DROITE - ASSY
  - 0031600-00 • PALETTE AJUST NEWTON ALU 6.5x8po, GAUCHE - ASSY
  - 0031601-00 • PALETTE AJUST NEWTON ALU 7.5x8po, DROITE - ASSY
  - 0031602-00 • PALETTE AJUST NEWTON ALU 7.5x8po, GAUCHE - ASSY
  - 0031603-00 • PALETTE AJUST NEWTON ALU 4.5x10po, DROITE - ASSY
  - 0031604-00 • PALETTE AJUST NEWTON ALU 4.5x10po, GAUCHE - ASSY
  - 0031605-00 • PALETTE AJUST NEWTON ALU 5.5x10po, DROITE - ASSY
  - 0031606-00 • PALETTE AJUST NEWTON ALU 5.5x10po, GAUCHE - ASSY
  - 0031613-00 • PALETTE AJUST NEWTON ALU 6.5x10po, DROITE - ASSY
  - 0031623-00 • PALETTE AJUST NEWTON ALU 6.5x10po, GAUCHE - ASSY
  - 0031633-00 • PALETTE AJUST NEWTON ALU 7.5x10po, DROITE - ASSY
  - 0031670-00 • PALETTE AJUST NEWTON CARBONE 5.5x8po, DROITE - ASSY
  - 0031608-00 • PALETTE AJUST NEWTON CARBONE 5.5x8po, GAUCHE - ASSY
  - 0031609-00 • PALETTE AJUST NEWTON CARBONE 6.5x8po, DROITE - ASSY
  - 0031610-00 • PALETTE AJUST NEWTON CARBONE 6.5x8po, GAUCHE - ASSY
  - 0031611-00 • PALETTE AJUST NEWTON CARBONE 7.5x8po, DROITE - ASSY
  - 0031612-00 • PALETTE AJUST NEWTON CARBONE 7.5x8po, GAUCHE - ASSY
- Bagues: 41703 x4
- Extensions : 31638-00 x 2

Outil(s) requis:


- Pour les bagues:
  - Clé Allen 5mm
  - Clé dynamométrique ajustée à 12 Nm
  - Frein filet bleu
- Pour les palettes:
  - Clé Allen 4mm
  - Clé à cliquet avec embout 10mm

ASSEMBLAGE MONTAGE HAUT

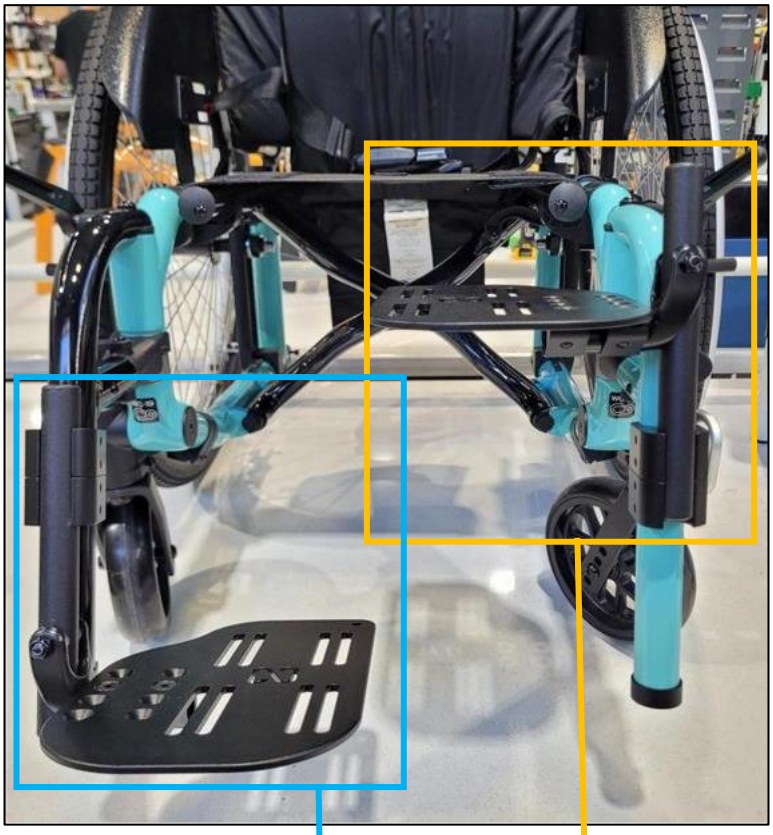


ASSEMBLAGE 11'' ET +



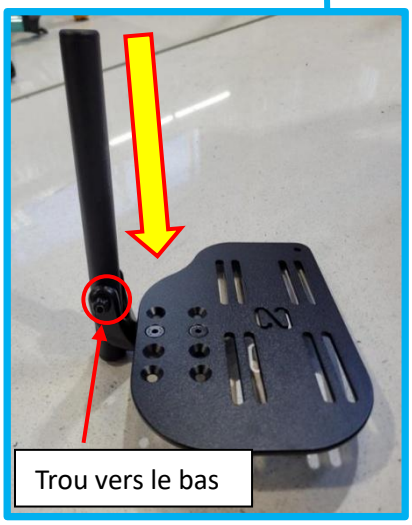


ASSEMBLAGE 10.5 '' ET -



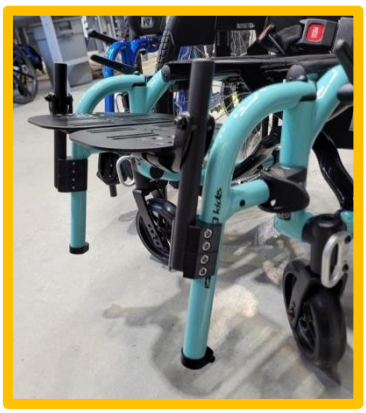

Palettes Ajustable en angle :

1. Retirer la quincaillerie de l'assemblage de la palette.
2. Insérer l'extension et réinstaller la quincaillerie en insérant la vis du derrière vers le devant.
3. Serrer l'assemblage à l'aide d'une clé Allen 4mm et d'une clé à cliquet avec un embout 10mm .

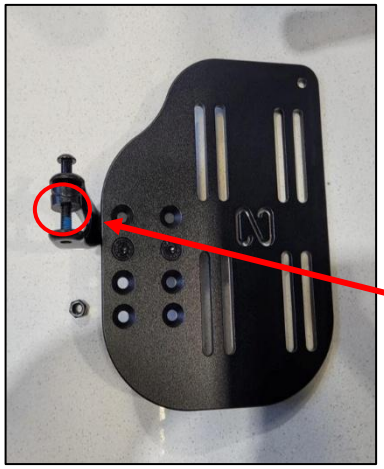

Palettes Standards :

1. Retirer la quincaillerie de la palette.
2. Insérer l'extension et remettre la quincaillerie tel quel.
3. Serrer l'assemblage à l'aide d'une clé Allen 4mm .







Installation des Bagues:

1. Retirer les vis avec une clé Allen 5mm et appliquer une goutte de frein filet bleu sur chaque vis.
2. Remettre les vis sur la bague.



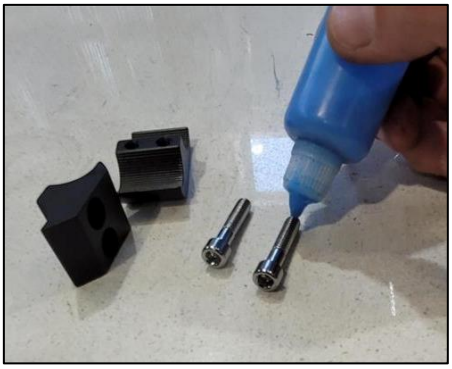

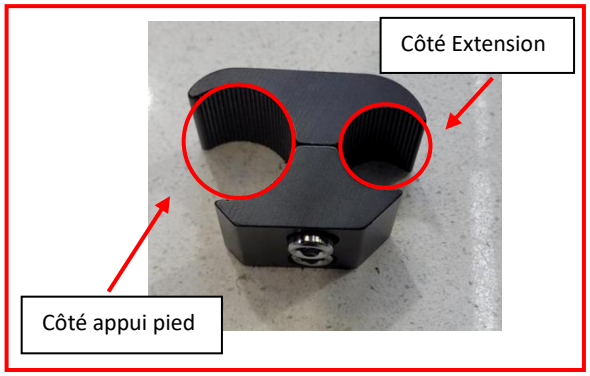

3. Installer les bagues sur la structure de l'appui pied. (tête de vis côté extérieur de la structure).
4. Retenir les bagues et insérer l'extension.
5. Ajuster l'extension à la longueur voulue .
6. Serrer les bagues avec une clé Allen 5mm .
7. Torquer les vis à 12 Nm.

** Pour une plus grande plage d'ajustement, les bagues doivent être collées et non séparées **





