INSTRUCTION D'INSTALLATION

ENTRETIEN ET INSTALLATION DES ANCRAGES WC19 DES FAUTEUILS HELIO A6 - A7 - MOVE

- **Les modifications apportées aux fauteuils roulants sont susceptibles d'affecter la conformité à la norme WC19 incluent, mais sans s'y limiter : le déplacement des points de fixation, l'abaissement de la hauteur du dossier, la réduction de la longueur du siège, l'ajout de supports posturaux secondaires qui ne sont pas fermement attachés au fauteuil roulant, en ajoutant des composantes qui ont des bords tranchants (d'un rayon inférieur à 2 mm), ou tout changement qui compromet l'intégrité structurelle du cadre du fauteuil roulant.**

- **Tout entretien et installation en lien avec les ancrages WC19 doit être effectué selon cette instruction et par un technicien.**

- **Il est OBLIGATOIRE de vérifier le # de série du fauteuil pour toute demande de modification et/ou réparation pour le dossier, les bâtis de roues avant et le cadre du fauteuil faite par le client.**

- **Il est nécessaire de vérifier la condition de la quincaillerie afin de s'assurer qu'elle ne comporte aucun signe d'usure / dommage, dans le cas échéant de la nouvelle quincaillerie doit être utilisée. Dans le cas où la quincaillerie est réutilisée, du liquide frein filet bleu doit être ajouté.**

- **Le fauteuil roulant doit être inspecté par Motion Composites avant d'être utilisé après un quelconque type de collision.**

- **Il n'est pas possible, pour les techniciens, d'ajouter une ceinture de positionnement aux ancrages WC19 si elle n'était pas présente lors de l'assemblage du fauteuil en usine.**

Matériel(s) requis:	Outil(s) requis:
• S000015-00-WC19 KIT - CADRE ALU, CEINTURE COURTE • S000015-01-WC19 KIT - CADRE ALU, CEINTURE LONGUE • S000015-02-WC19 KIT - CADRE ALU, SANS CEINTURE	• Clé Allen de 4 mm • Clé dynamométrique ajustée à 7 Nm • Frein filet **bleu**

A. Entretien et installation des ancrages avant..... p.3
B. Entretien et installation des ancrages arrière avec ceinture..... p.4
C. Entretien et installation des ancrages arrière sans ceinture..... p.5

INSTRUCTION D'INSTALLATION


ENTRETIEN ET INSTALLATION DES ANCRAGES WC19 DES FAUTEUILS HELIO A6 - A7 - MOVE

0060419B_0060420B
WC-19 KIT - CADRE ALU

!!! KIT WC-19 INCOMPATIBLE AVEC L'OPTION HD (265lbs MAX) !!!

NOTE: VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE COMMANDER LE KIT COMPLET WC-19 EN COMMANDE DE PIÈCES. CES COMPOSANTS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS PAR MOTION COMPOSITES AFIN D'ÊTRE CERTIFIÉS WC-19


No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	0060419-00	0060420-00
1	0051536A-00	CEINTURE WC-19 COURTE- ASSEMBLAGE	1	-
2	0051500A-00	CEINTURE WC-19 LONGUE - ASSEMBLAGE	-	1
3	0051150C-00	VIS WC-19	2	2
4	0051152A-00	RONDELLE PLASTIQUE WC-19	4	4
5	0051151A-00	RONDELLE BELLEVILLE WC-19	2	2
6	0051149A-00	TIE DOWN WC-19	2	2
7	0022004C-00	ANCRAGE	2	2
8	0090659A-00	VIS TÊTE BOMBÉE M6x1 x16mm L	4	4
9	0070375A-00	AUTOCOLANT AVERTISSEMENT WC-19	4	4
10	0007215A-01	ÉTIQUETTE RESNA WC19	1	1

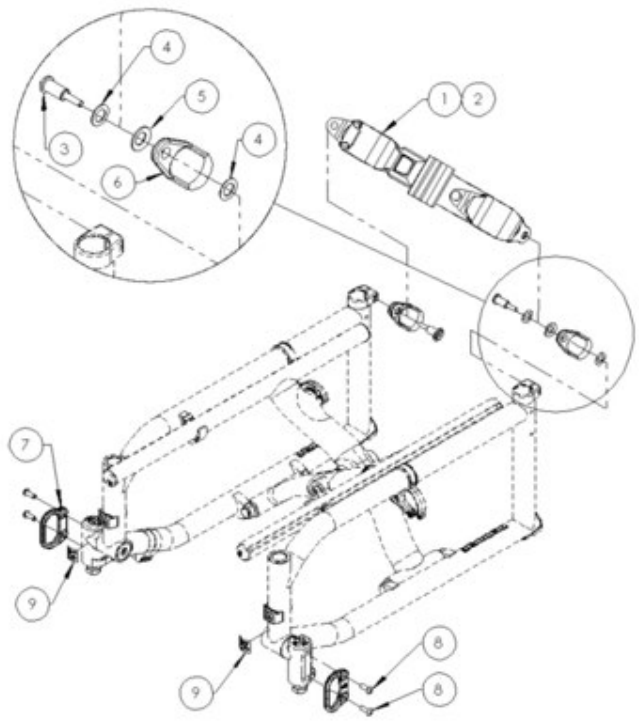

GRANDEUR	AJUSTEMENT
Courte	20-41 po
Longue	20-46po

LES AUTOCOLLANTS WC-19 DOIVENT ÊTRE POSITIONNÉS À L'ARRIÈRE DES CADRES DU CÔTÉ DROITE ET GAUCHE


VUE ARRIÈRE

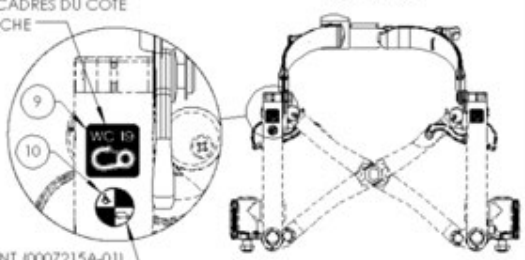

L'AUTOCOLLANT (0007215A-01) DOIT ÊTRE PLACÉ À L'ARRIÈRE DU CADRES GAUCHE

VUE AVANT


LES AUTOCOLLANTS WC-19 DOIVENT ÊTRE POSITIONNÉS À L'AVANT DES CADRES DU CÔTÉ DROITE ET GAUCHE

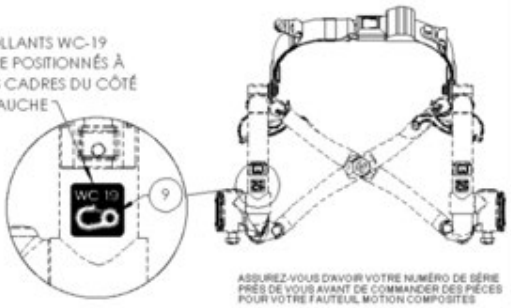

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

A. ENTRETIEN ET INSTALLATION DES ANCRAGES AVANT


ENTRETIEN DES ANCRAGES AVANT

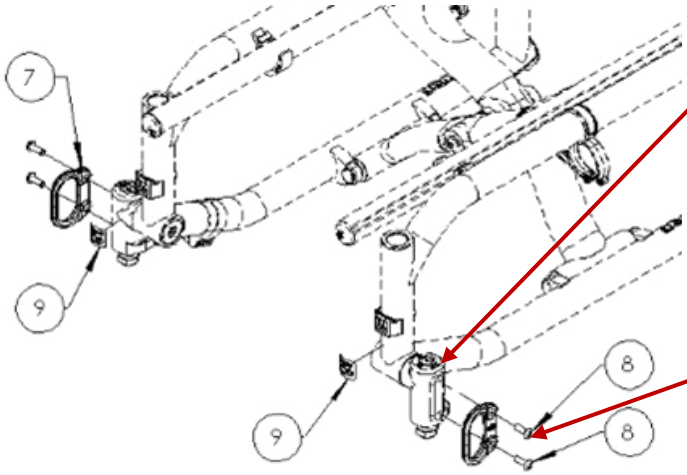

1. Retirer les 2 vis du bâti de roue à l'aide de la clé Allen de 4 mm.

2. Faire le montage suivant.
   - Mettre 1 goutte de frein filet sur la pointe de la vis.
   - Procéder à l'installation sur le bâti de roue.
   - Finaliser l'installation avec la clé dynamométrique ajustée à **7 Nm**.

3. S'assurer que l'autocollant de conformité à l'avant du cadre du fauteuil près du bâti de roue est présent et bien positionné. L'ajouter au besoin.

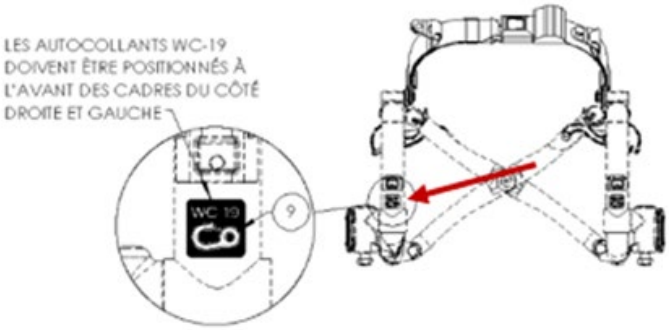


4. Répétez les étapes 1 à 3 de l'autre côté.

INSTALLATION DES ANCRAGES AVANT


1. Débuter l'installation à partir de l'étape 2 de la section précédente.

B. ENTRETIEN ET INSTALLATION DES ANCRAGES ARRIÈRE AVEC CEINTURE

ENTRETIEN DES ANCRAGES ARRIÈRES AVEC CEINTURE

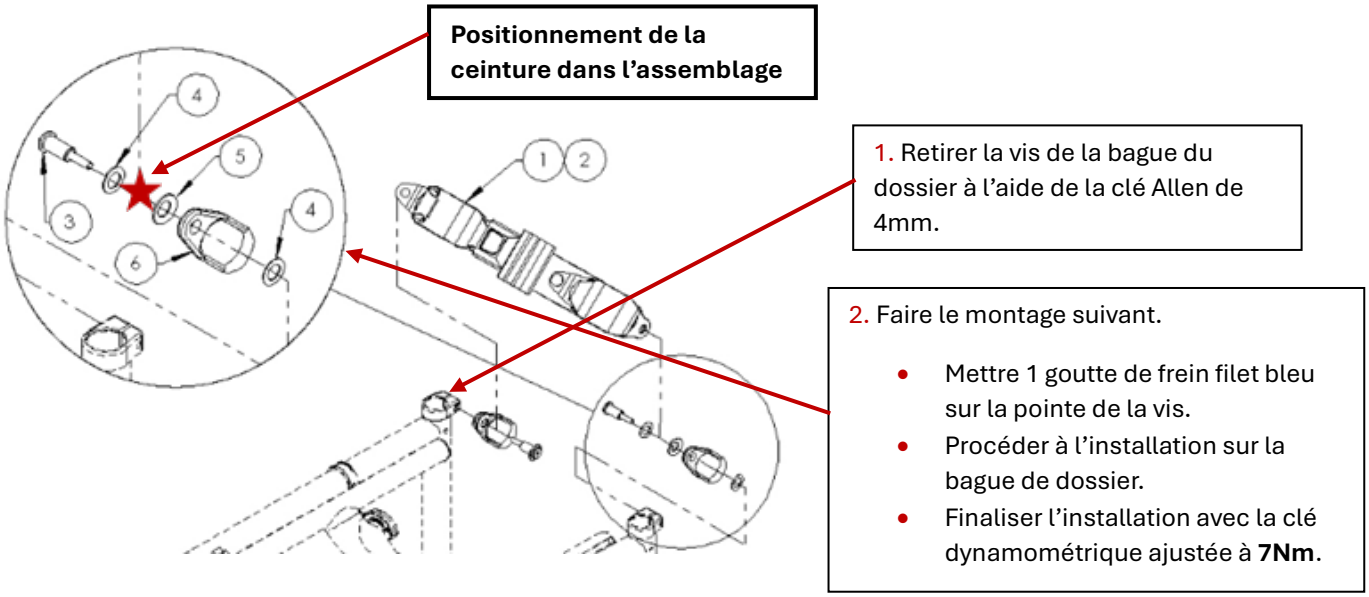

3. S'assurer que l'autocollant de conformité derrière le fauteuil en haut du cadre + l'autocollant de certification sont présents et bien positionnés. Les ajouter au besoin.

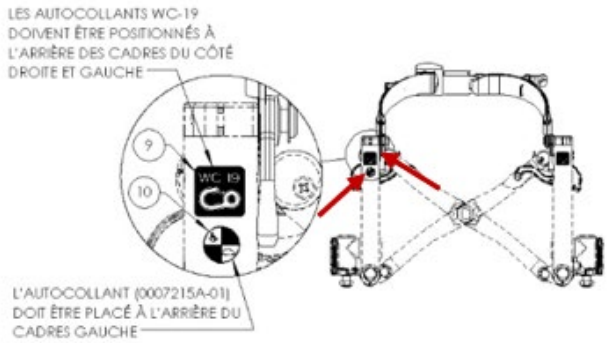

4. Répéter les étapes 1 à 3 de l'autre côté.


INSTALLATION DES ANCRAGES ARRIÈRE AVEC CEINTURE

1. Débuter l'installation à partir de l'étape 2 de la section précédente.

C. ENTRETIEN ET INSTALLATION DES ANCRAGES ARRIÈRE SANS CEINTURE

ENTRETIEN DES ANCRAGES ARRIÈRE SANS CEINTURE

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0051150C-00	VIS WC-19	2
2	0091056A-00	ESPACEUR M10x1 4mm ODX4mm L	2
3	0051151A-00	RONDELLE BELLEVILLE WC-19	2
4	0051149A-00	TIE DOWN WC-19	2
5	0051152A-00	RONDELLE PLASTIQUE WC-19	2
6	0022004C-00	ANCRAGE	2
7	0090659A-00	VIS TÊTE BOMBÉE M6x1 x16mm L	4
8	0070375A-00	AUTOCOLANT AVERTISSEMENT WC-19	4
9	0007215A-01	ÉTIQUETTE RESNA WC19	1

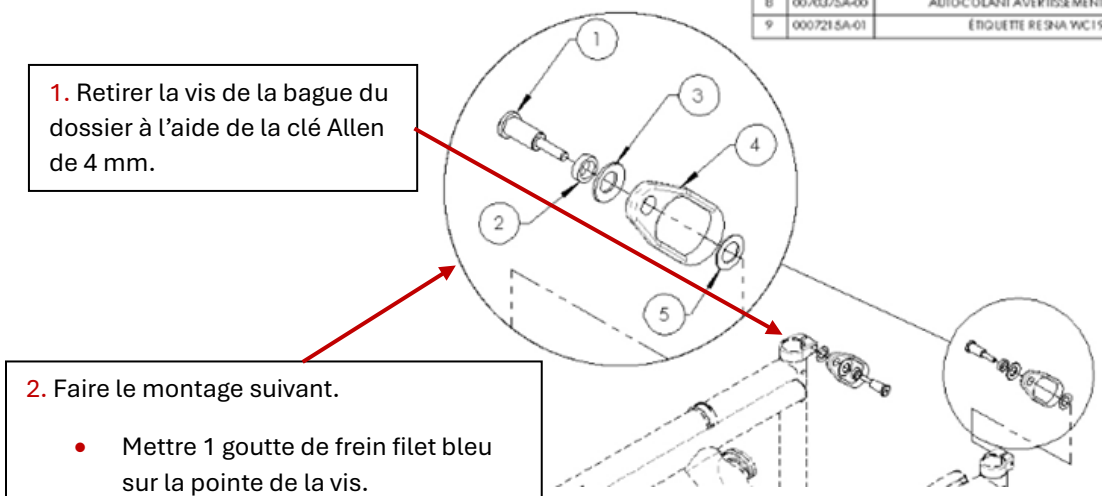

1. Retirer la vis de la bague du dossier à l'aide de la clé Allen de 4 mm.

2. Faire le montage suivant.

- Mettre 1 goutte de frein filet bleu sur la pointe de la vis.
- Procéder à l'installation sur la bague de dossier.
- Finaliser l'installation avec la clé dynamométrique ajustée à **7Nm**.

3. Installer les autocollants de certification et de conformité de la même façon que les ancrages avec la ceinture.

INSTALLATION DES ANCRAGES ARRIÈRE SANS CEINTURE

1. Débuter l'installation à partir de l'étape 2 de la section précédente.