INSTRUCTION D'INSTALLATION

ENTRETIEN DES ANCRAGES ARRIÈRE WC19 DES FAUTEUILS VELOCE

- **Les modifications apportées aux fauteuils roulants sont susceptibles d'affecter la conformité à la norme WC19 incluent, mais sans s'y limiter : le déplacement des points de fixation, l'abaissement de la hauteur du dossier, la réduction de la longueur du siège, l'ajout de supports posturaux secondaires qui ne sont pas fermement attachés au fauteuil roulant, en ajoutant des composantes qui ont des bords tranchants (d'un rayon inférieur à 2 mm), ou tout changement qui compromet l'intégrité structurelle du cadre du fauteuil roulant.**

- **Tout entretien et installation en lien avec les ancrages WC19 doit être effectué selon cette instruction et par un technicien.**

- **Il est OBLIGATOIRE de vérifier le # de série du fauteuil pour toute demande de modification et/ou réparation pour le dossier, les bâtis de roues avant et le cadre du fauteuil faite par le client.**

- **Il est nécessaire de vérifier la condition de la quincaillerie afin de s'assurer qu'elle ne comporte aucun signe d'usure / dommage, dans le cas échéant de la nouvelle quincaillerie doit être utilisée. Dans le cas où la quincaillerie est réutilisée, du liquide frein filet bleu doit être ajouté.**

- **Le fauteuil roulant doit être inspecté par Motion Composites avant d'être utilisé après un quelconque type de collision.**
- **Il n'est pas possible, pour les techniciens, d'ajouter une ceinture de positionnement aux ancrages WC19 si elle n'était pas présente lors de l'assemblage du fauteuil en usine.**

- **L'INSTALATION ET L'ENTRETIEN DES ANCRAGES AVANT WC19 DES FAUTEUILS VELOCE SE FAIT UNIQUEMENT À L'USINE .**
- **L'INSTALLATION DES ANCRAGES ARRIÈRE WC19 SUR LES FAUTEUILS VELOCE SE FAIT UNIQUEMENT À L'USINE.**

Matériel(s) requis:	Outil(s) requis:
• S000016-00-WC19 KIT - CADRE VELOCE 2018, CEINTURE COURTE • S000016-01-WC19 KIT - CADRE VELOCE 2018, CEINTURE LONGUE • S000016-02-WC19 KIT - CADRE VELOCE 2018, SANS CEINTURE	• Clé Allen de 4 mm • Clé dynamométrique ajustée à 7 Nm • Frein filet **bleu**

A. Entretien des ancrages arrière avec ceinture….. p.3
B. Entretien des ancrages arrière sans ceinture….. p.4

ENTRETIEN DES ANCRAGES ARRIÈRE WC19 DES FAUTEUILS VELOCE


0060413B_0060414B
WC-19 KIT - CADRE CARBONE


!!! KIT WC-19 INCOMPATIBLE AVEC L'OPTION HD (265lbs MAX) !!!

NOTE: VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE COMMANDER LE KIT COMPLET WC-19 EN COMMANDE DE PIÈCES. CES COMPOSANTS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS PAR MOTION COMPOSITES AFIN D'ÊTRE CERTIFIÉS WC-19

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	0060413-00	0060414-00
1	0051536A-00	CEINTURE WC-19 COURTE - ASSEMBLAGE	1	-
2	0051500A-00	CEINTURE WC-19 LONGUE - ASSEMBLAGE	-	1
3	0011505A-00	BAGUE SUPPORT H-BLOCK WC-19 - ASSEMBLAGE	2	2
4	0051150C-00	VIS WC-19	2	2
5	0051152A-00	RONDELLE PLASTIQUE WC-19	4	4
6	0051151A-00	RONDELLE BELLEVILLE WC-19	2	2
7	0051149A-00	TIE DOWN WC-19	2	2
8	0022004C-00	ANCRAGE	2	2
9	0090659A-00	VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x16mm L	4	4
10	0070375A-00	AUTOCOLANT AVERTISSEMENT WC-19	4	4
11	0007215A-01	ÉTIQUETTE RESINA WC19	1	1


GRANDEUR	AJUSTEMENT
Courte	20-41po
Longue	20-46po

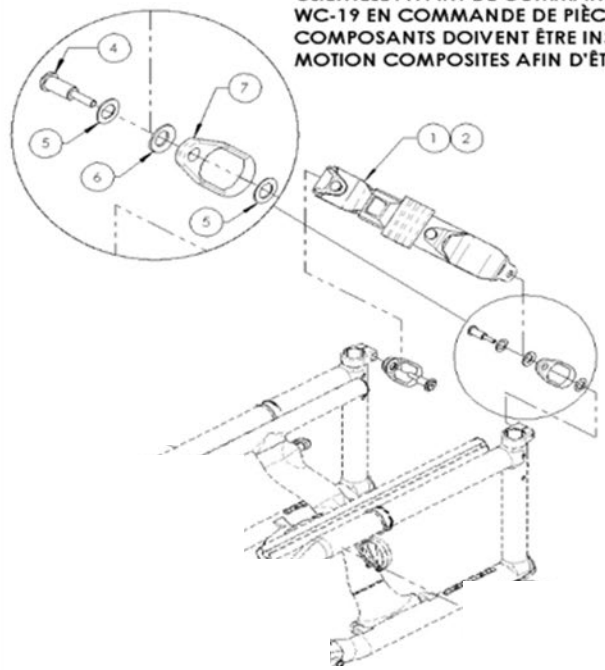

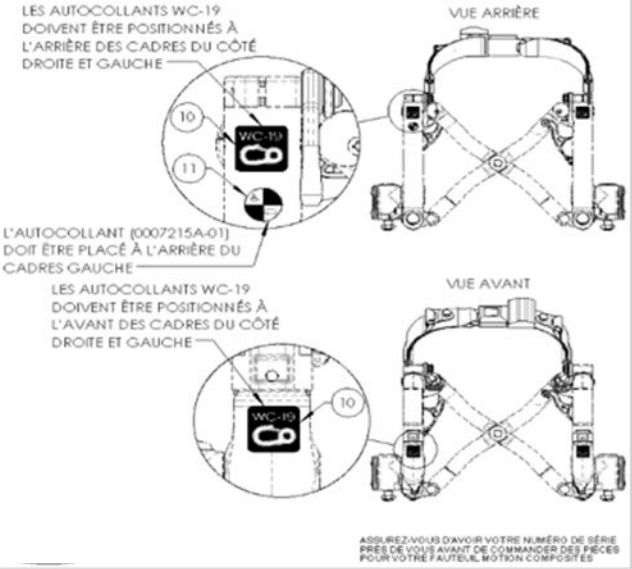


ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE PRÈS DE VOUS AVANT DE COMMANDER DES PIÈCES POUR VOTRE FAUTEUIL MOTION COMPOSITES

A. ENTRETIEN DES ANCRAGES ARRIÈRE AVEC CEINTURE

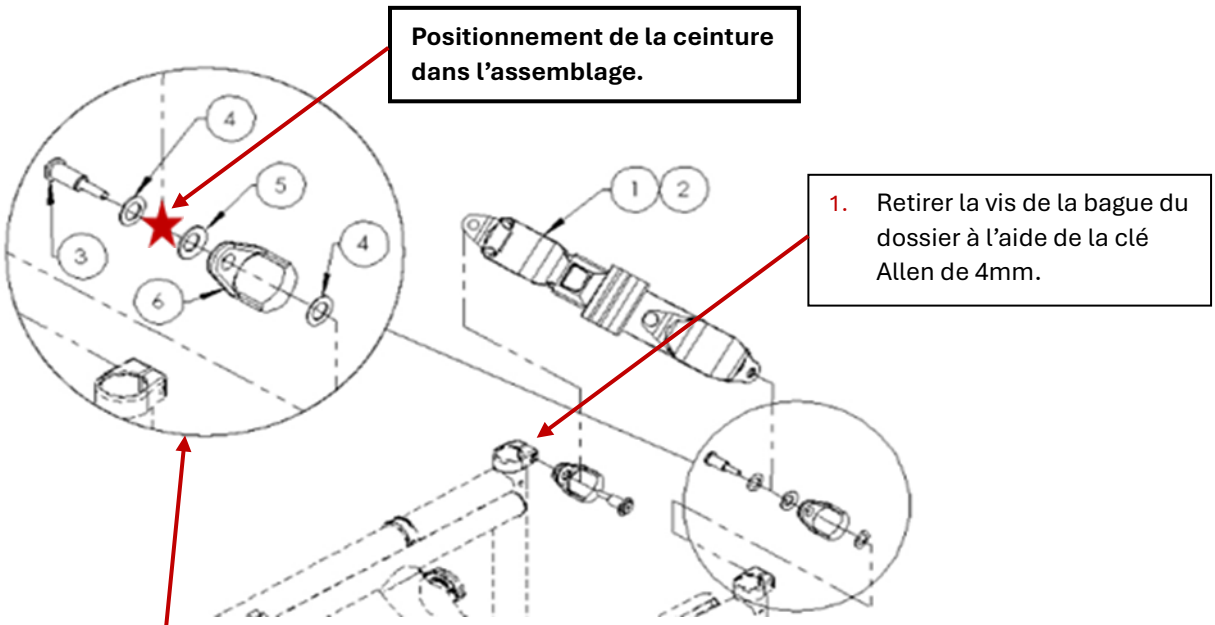


3. S'assurer que l'autocollant de conformité derrière le fauteuil sur le haut du cadre + l'autocollant de certification sont présents et bien positionnés. Les ajouter au besoin.

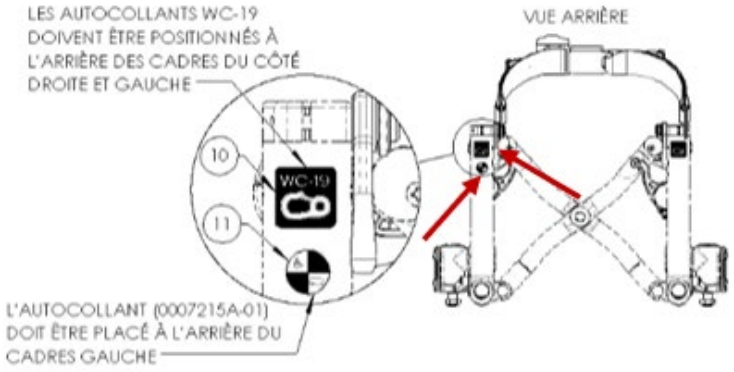

4. Répéter les étapes 1 à 3 de l'autre côté.

B. ENTRETIEN DES ANCRAGES ARRIÈRE SANS CEINTURE

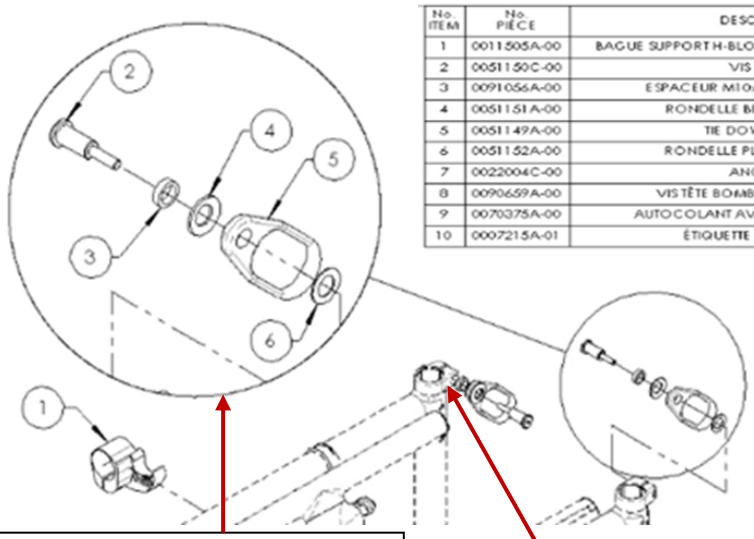

No. ITEM	No. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0011505A-00	BAGUE SUPPORT H-BLOCK WC-19 - ASSEMBLAGE	2
2	0051150C-00	VIS WC-19	2
3	0091056A-00	ESPACEUR M10x14mm ODX4mm L	2
4	0051151A-00	RONDELLE BELLEVILLE WC-19	2
5	0051149A-00	TIE DOWN WC-19	2
6	0051152A-00	RONDELLE PLASTIQUE WC-19	2
7	0022004C-00	ANCRAGE	2
8	0090659A-00	VIS TÊTE BOMBÉE M6x1x16mm L	4
9	0070375A-00	AUTOCOLANT AVERTISSEMENT WC-19	4
10	0007215A-01	ÉTIQUETTE RESNA WC19	1

2. Faire le montage suivant.

- Mettre 1 goutte de frein filet sur la pointe de la vis.
- Procéder à l'installation sur le bâti de roue avant avec l'ancrage vers l'avant du fauteuil.
- Finaliser l'installation avec la clé dynamométrique ajustée à **7 Nm**.

1. Retirer la vis de la bague du dossier à l'aide de la clé Allen de 4mm.

3. Installer les autocollants de certification et de conformité de la même façon que les ancrages avec la ceinture.