



PLIANT  
ALUMINIUM

**HELIO kids A**

| L'ADAPTABILITÉ QUI ÉVOLUE AVEC L'ENFANT



# HELIO kids A

## L'ADAPTABILITÉ QUI ÉVOLUE AVEC L'ENFANT

Le fauteuil roulant pliant HELIO Kids A de Motion Composites a été conçu pour offrir une valeur exceptionnelle aux enfants actifs. Que ce soit pour jouer avec les amis, aller à l'école, s'amuser et se déplacer facilement... les enfants devraient pouvoir être simplement des enfants! C'est pourquoi nous avons mis à profit la technologie sophistiquée et la performance élevée de notre alliage d'aluminium de série 7000 afin d'offrir au HELIO Kids A une maniabilité et une légèreté incomparables.

Avec son look coloré et amusant, le HELIO Kids A accompagnera l'enfant tout au long de sa croissance, dans ses journées bien remplies comme dans sa vie active.

Reconnue internationalement, Motion Composites jumelle le savoir-faire et la passion pour l'innovation afin de donner naissance à un produit unique et inspiré par vous. Visionnaires et passionnés, nous basons notre réflexion sur l'expérience.

Pour nous, un fauteuil roulant haut de gamme améliore la qualité de vie des gens grâce à des composants de qualité, une conception intelligente et des fonctionnalités innovantes. Le HELIO Kids A incarne notre passion pour la performance, notre engagement envers la qualité et notre vision d'une plus grande liberté.

**AU DELÀ DES LIMITES!**







## PROPULSION ET MANIABILITÉ FACILITÉES

Conçu à partir de notre cadre reconnu pour sa performance, le HELIO Kids A réduit la fatigue et améliore la mobilité au quotidien. Ses cadres latéraux monocoques, son système de pliage ultrarigide et son croisillon symétrique travaillent ensemble pour maximiser l'efficacité et la réactivité.

Le résultat : une propulsion plus facile, une maniabilité agile et plus d'énergie pour ce qui compte le plus : être un enfant.

## S'ADAPTE À LA CROISSANCE DE L'ENFANT

Un dossier ajustable en profondeur en option permet jusqu'à 7,6 cm (3 po) d'ajustement, et un kit de croissance est disponible pour s'adapter aux changements de largeur ; contribuant à maintenir un ajustement adéquat et à prolonger la durée de vie du fauteuil roulant.

Dans l'esprit HELIO, le HELIO Kids A est conçu pour offrir une grande capacité d'ajustement, avec un positionnement précis des roues arrière et un réglage infini du bâti de roues avant.

## ULTRALÉGER ET DURABLE

Ultraléger pour offrir une plus grande liberté de mouvement, le HELIO Kids A combine l'aluminium haute résistance de série 7000 à une technologie d'hydroformage avancée.

Fabriquée avec précision pour maximiser la résistance tout en minimisant le poids, son cadre durable est conçu pour résister à la réalité des enfants. Il offre fiabilité et performance durables sans compromettre la mobilité.



## CONÇU AVEC LA SÉCURITÉ EN TÊTE

Le HELIO Kids A propose une gamme d'options et de configurations axées sur la sécurité pour simplifier l'usage quotidienne et le transport. Des ancrages conformes à la norme WC19 sont offerts pour assurer un transport sécuritaire à bord d'un véhicule motorisé, tandis que des options comme les ceintures de positionnement et les poignées poussoir offrent un soutien supplémentaire au besoin.

Un fauteuil roulant pédiatrique réunissant des cadres latéraux monocoques, un dossier ajustable en profondeur qui s'adapte à la croissance, et la sécurité WC19 en un seul produit. Ensemble, ces choix de conception apportent davantage de confiance et de tranquillité d'esprit aux enfants comme aux proches aidants.



## PERSONNALISATION FACILE GRÂCE AUX COULEURS ET AUX ACCESSOIRES

Les enfants peuvent exprimer leur personnalité et développer un sentiment d'appartenance envers leur fauteuil roulant grâce à des choix de couleurs indépendants pour le cadre et les supports d'appuis-pieds, à des couleurs de mains courantes offertes en option ainsi qu'à une vaste gamme de pièces et d'accessoires.


Pour encore plus de personnalisation et d'adaptation, EVO Sur Mesure propose des solutions conçues autour des besoins, des préférences et des objectifs uniques de chaque enfant.



ATTRIBUTS UNIQUES

CADRE MONOCOQUE RIGIDE

Élimine les joints, réduit le mouvement et maximise l'efficacité

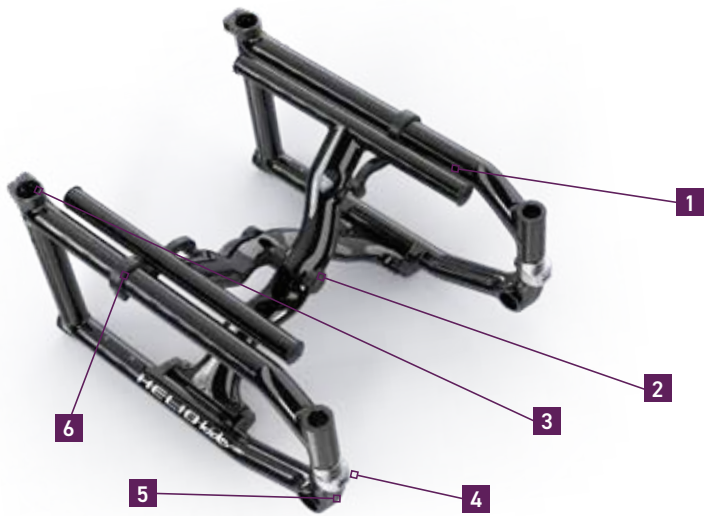

**1 LONGERONS DE SIÈGE EN ALUMINIUM**  
Longerons de siège intégrant des rainures qui permettent à la toile d'assise de glisser facilement en place



**2 SYSTÈME DE PLIAGE ULTRARIGIDE**  
Pour une efficacité de propulsion maximale



**3 OPTIONNEL: DOSSIER AJUSTABLE EN PROFONDEUR**  
Offre jusqu'à 7,6 cm (3 po) d'ajustement de la profondeur d'assise, par incréments continus



**4 BÂTI DE ROUE AVANT**  
Pour un réglage des angles simple et précis



**5 SYSTÈME ANTI-BATTEMENT**  
Assure un fonctionnement agréable et plus efficace



**6 ATTACHES DE CROISILLON EN PLASTIQUE INJECTÉS**  
Plus léger et plus durable pour des mouvements plus fluides

TABLEAU TECHNIQUE

|                                               |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CADRE                                         | Pliable                                                                                                                                                           |
| MATÉRIAU                                      | Aluminium 7005 T6                                                                                                                                                 |
| POIDS DE TRANSPORT                            | 6,03 kg   13,3 lb. (12x12 sans : roues arrière, accoudoirs/protège-vêtements, coussin d'assise, anti-basculants, dossier ajustable en profondeur et appuis-pieds) |
| POIDS EN CONFIGURATION FONCTIONNELLE MINIMALE | 10,8 kg   23,8 lb. (12x12 avec : roues arrière, blocages de roue, appuis-pieds, toile de dossier et coussin de siège)                                             |
| LIMITE DE POIDS                               | 165 lb.   74,8 kg                                                                                                                                                 |
| LARGEUR DU SIÈGE                              | 35,6 cm à 50,8 cm   14 po à 20 po                                                                                                                                 |
| PROFONDEUR DU SIÈGE                           | 35,6 cm à 50,8 cm   14 po à 20 po                                                                                                                                 |
| HAUTEUR SOL-SIÈGE AVANT                       | 33 cm à 54,6 cm   13 po à 21 ½ po (avec roues avant de 7,6 cm à 20,3 cm   3 po à 8 po)                                                                            |
| HAUTEUR SOL-SIÈGE ARRIÈRE                     | 31,8 cm à 51,4 cm   12 ½ po à 20 ¾ po (avec roues de 50,8 cm à 66 cm   20 po à 26 po)                                                                             |

TECHNOLOGIES

- ALUMINIUM ULTRA LÉGER 7005 T6**  
Un alliage d'aluminium reconnu pour son rapport résistance-masse.

**CADRE MONOCOQUE RIGIDE**  
Fait d'une seule pièce, ce cadre est plus solide et requiert moins d'entretien qu'un cadre standard en deux parties. Efficacité de propulsion et légèreté optimisées.

**CROISILLON SYMÉTRIQUE**  
Le croisillon entièrement symétrique réduit la torsion et répartit mieux l'énergie dans l'ensemble du cadre.


**SYSTÈME DE PLIAGE ULTRARIGIDE**  
Assure une tolérance de haute précision et des axes de pivot surdimensionnés offrant la meilleure efficacité de propulsion de sa catégorie.
- PLAQUE DE MONTAGE FORGÉE VERTICALE**  
Permet le réglage des roues arrière le plus précis de l'industrie et maximise la rigidité et la réactivité du fauteuil.

**BÂTI DE ROUE AVANT**  
Incorporé au cadre, il offre une durabilité à toute épreuve et permet des réglages infiniment précis.

**SYSTÈME ANTI-BATTEMENT**  
Permet de réduire le battement de la roue avant d'un simple tour de vis.

**ACCESSOIRES NEWTON**  
Les pièces et accessoires Newton sont légers avec un style et des fonctions améliorés.

DIMENSIONS

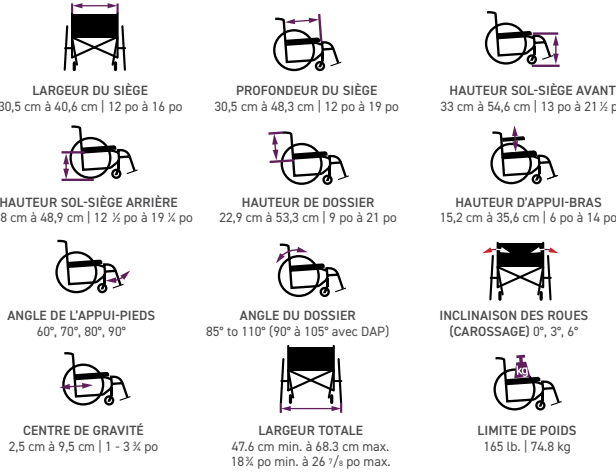

COULEURS OFFERTES

La couleur est appliquée sur le cadre et les supports d'appui-pied. Le croisillon offre un fini noir.



AU-DELÀ DU FAUTEUIL ROULANT

Au-delà de sa configuration de base, le HELIO Kids A offre aussi une gamme élargie d'options avancées conçues pour affiner le positionnement, répondre à l'évolution des besoins ou s'adapter au style personnel de l'enfant. Ces options supplémentaires permettent aux enfants comme aux cliniciens d'exploiter pleinement le potentiel du fauteuil roulant.

**EVO SUR MESURE**

Chaque enfant est unique. Des modifications subtiles aux détails personnalisés, EVO Sur Mesure permet d'adapter un fauteuil roulant HELIO Kids aux besoins, aux préférences et au mode de vie de chacun. Presque tout est possible, par exemple :

- Roues avant UltraCaster en aluminium peint
- Fauteuil roulant aux couleurs personnalisées
- Croisillon peint
- Protège-rayons personnalisés
- Solutions de personnalisation supplémentaires offertes

**nxt SEATING**

Un bon soutien est essentiel. Le HELIO Kids A est compatible avec une gamme de dossiers et de coussins NXT conçus pour offrir un soutien adapté tout en évoluant avec les besoins de l'utilisateur.

- Le dossier Xtend LOW est offert en tailles pédiatriques et propose un ajustement de croissance intégré
- Les dossiers Optima et Optima Carbon sont offerts en formats pédiatriques
- La quincaillerie Quick Fit permet une installation simple, des ajustements faciles et un retrait rapide pour le transport
- Des coussins NXT compatibles sont offerts pour améliorer le confort et le positionnement

**PIÈCES ET ACCESSOIRES**

Complétez l'expérience HELIO Kids grâce à une gamme d'accessoires Motion Composites et NEWTON conçus pour améliorer le confort, le soutien, la commodité et la fonctionnalité au quotidien.

- Poignées de poussée pour accompagnateur
- Ceintures de positionnement
- Tablette
- Accessoires supplémentaires offerts pour répondre aux besoins et aux préférences de chacun



## AU-DELÀ DES LIMITES

Des innovateurs passionnés repoussant les limites du possible, voilà ce que nous sommes. Une ingénierie à la fine pointe de la technologie alliée à des matériaux novateurs pour créer le mouvement, voilà ce que nous faisons. Nos fauteuils roulants ultralégers sont l'écho de la passion dont font preuve les utilisateurs jour après jour, voilà ce qui nous rend fiers. Par notre approche différente et notre attitude distincte, nous visons à améliorer la vie des gens, à nourrir leur sentiment de liberté et à révolutionner la façon dont les gens perçoivent les fauteuils roulants.

**APPRENEZ-EN PLUS** Pour en découvrir davantage sur le HELIO KIDS et nos autres modèles de fauteuils roulants ainsi que pour toutes autres informations concernant les produits Motion Composites, visitez le **[motioncomposites.com](http://motioncomposites.com)**.



T 1 (866) 650-6555

F 1 (888) 966-6555

**[motioncomposites.com](http://motioncomposites.com)**

007025C-01-v1-KIDSAluminumBROCHURE-FRENCH\_23-06-2026

