



**Conçu pour soutenir**  
tous vos mouvements

## Armadillo

### Dossier rigide

Le dossier rigide modulaire Armadillo de NXT est doté de réglages multiples permettant d'offrir un soutien postural optimal à chaque utilisateur. Sa coquille modulaire en trois sections est munie d'un coussin avec une couche de mousse visco-élastique infusée de gel appelée smartGEL. Le dossier rigide Armadillo a été conçu afin de s'adapter à la forme unique de la colonne vertébrale de son utilisateur, ce qui en fait un choix idéal pour les personnes présentant une cyphose ou ayant des besoins particuliers en matière de positionnement vertébral.




## VUE D'ENSEMBLE

**A** Épouse la forme de la colonne vertébrale des utilisateurs présentant une cyphose ou ayant des besoins particuliers en matière de positionnement vertébral.

**B** Allègement du poids à l'apophyse épineuse grâce à la section intermédiaire renforcée.

**C** Fixations extensibles permettant au dossier de s'adapter à des fauteuils jusqu'à 2 po (5,08 cm) plus larges.

**D** Section inférieure ajustable offrant un soutien pelvien personnalisé au niveau de l'épine iliaque postéro-supérieure.

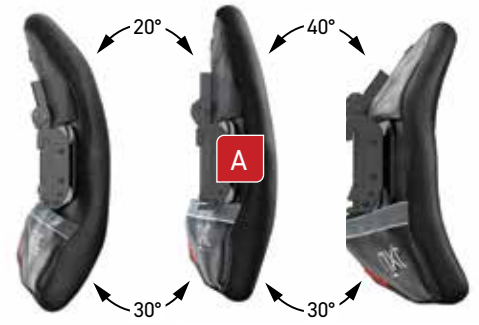


## smartx3D

### LA TECHNOLOGIE SMARTX3D A RÉVOLUTIONNÉ LA CONCEPTION DES COUSSINS ET DOSSIERS RIGIDES NXT

Notre tissu innovant smartx3D offre un confort et une durabilité sans précédent. Ce tissu sophistiqué comprend une technologie à trois couches avec, entre la couche inférieure et la couche supérieure, un canal rempli d'air qui éloigne la chaleur et l'humidité.

Le smartx3D est un tissu doux, qui respire et chasse l'humidité, ce qui offre à l'utilisateur un confort inégalé.

- Doux et confortable
- Propriétés antimicrobiennes
- Immersion et enveloppement améliorés
- Réduction du cisaillement
- Circulation de l'air 20 fois supérieure à celle offerte par les matériaux traditionnels

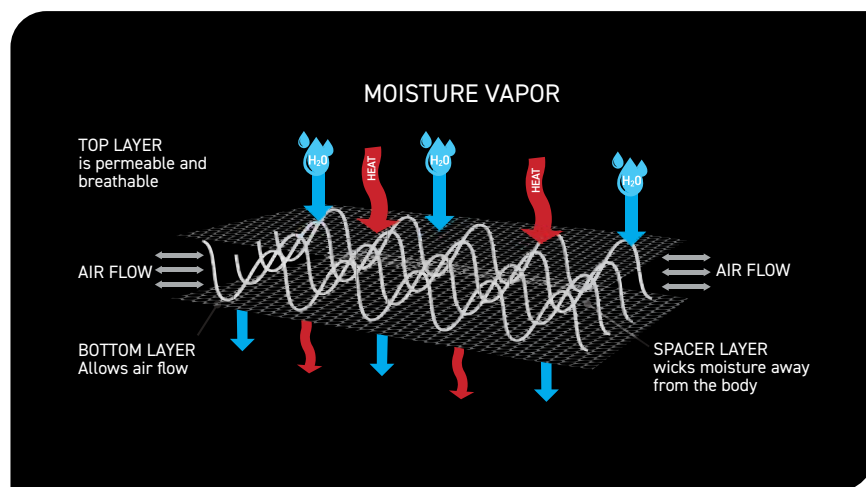

## CARACTÉRISTIQUES



### COQUILLE AJUSTABLE POUR LES UTILISATEURS PRÉSENTANT UNE CYPHOSE

Assure un bon soutien pelvien et maximise la surface de contact afin de permettre une distribution uniforme de la pression.



### COQUILLE AJUSTABLE POUR LES UTILISATEURS BARIATRIQUES OU PRÉSENTANT UNE LORDOSE

Peut s'ajuster afin d'offrir plus d'espace au niveau des muscles fessiers.



### BUTÉES LATÉRALES EN OPTION

Offrent un soutien latéral supplémentaire pour un meilleur contrôle postural.




### smartGEL™ INFUSED VISCO TECHNOLOGY

### MOUSSE VISCO-ÉLASTIQUE À DOUBLE DENSITÉ INFUSÉE DE GEL SMARTGEL

La technologie smartGEL permet de réduire la température à la surface en évacuant la chaleur pour plus de confort et une douceur accrue.

## ARMADILLO

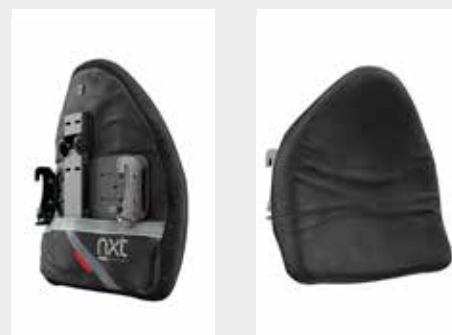

### FOURNI AVEC LE DOSSIER

- Coquille modulaire en aluminium légère en trois sections
- Coussin lombaire en mousse Visco à densité double, incluant la technologie smartGEL
- Housse antimicrobienne smartx3D faite de polyester extensible dans les quatre sens (lavable)
- Quincaillerie : système de fixation QuickFit


### ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Butées latérales de 2 po (5,08 cm)
- Insertions latérales
- Appui-tête
- Housse et mousse de rechange

# Spécifications Techniques

## Dimensions du dossier rigide **ARMADILLO**

Largeur	Hauteur	Largeur du fauteuil
14 po (35,6 cm)	16 po (40,6 cm)	14 à 16 po (35,6 cm à 40,6 cm)
16 po (40,6 cm)	16 po (40,6 cm)	16 à 18 po (40,6 cm à 45,7 cm)
18 po (45,7 cm)	18 et 20 po (45,7 cm et 50,8 cm)	18 à 20 po (45,7 cm à 50,8 cm)
20 po (50,8 cm)	18 et 20 po (45,7 cm et 50,8 cm)	20 à 22 po (50,8 cm à 55,9 cm)
22 po (55,9 cm)	18 et 20 po (45,7 cm et 50,8 cm)	22 à 24 po (55,9 cm à 61 cm)
24 po (61 cm)	18 et 20 po (45,7 cm et 50,8 cm)	24 à 26 po (61 cm à 66 cm)

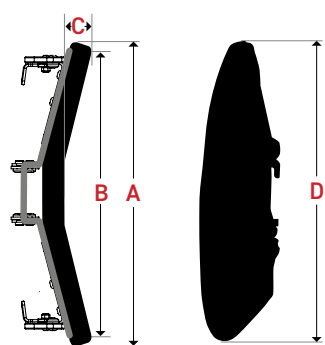

## Spécifications **ARMADILLO**

Poids de la coquille*	3,9 lb (1,77 kg)
Hauteur	16 à 20 po (40,6 cm à 50,8 cm)
Largeur	14 à 24 po (35,6 cm à 61 cm)
Ajustement de la partie supérieure	40° Antérieur / 20° Postérieur
Ajustement de la partie inférieure	30° Antérieur / 30° Postérieur
Capacité de poids	300 lb (136 kg) pour les dossiers de 14 à 20 po de largeur 400 lb (181 kg) pour les dossiers de 22 à 24 po de largeur

\*Poids d'un dossier avec coquille de 16 po (40,6 cm).


## Dimensions du dossier **ARMADILLO** – pouces (centimètres)

	14 (35,6)	16 (40,6)	18 (45,7)	18T (45,7)	20 (50,8)	20T (50,8)	22 (55,8)	22T (55,8)	24 (61)	24T (61)
A	14 (35,6)	16 (40,6)	18 (45,7)	18 (45,7)	20 (50,8)	20 (50,8)	22 (55,8)	22 (55,8)	24 (61)	24 (61)
B	11,5 (29,2)	13,5 (34,2)	15,5 (39,4)	15,5 (39,4)	17,5 (44,5)	17,5 (44,5)	19,75 (50,1)	19,75 (50,1)	21,5 (54,6)	21,5 (54,6)
C	1,75 (4,44)									
D	14 (35,6)	16 (40,6)	18 (45,7)	20 (50)	18 (45,7)	20 (50,8)	18 (45,7)	20 (50,8)	18 (45,7)	20 (50,8)

### Système de fixation QuickFit™

Permet un ajustement rapide et facile du dossier pendant que le client est assis dans le fauteuil.

- Les fixations peuvent être inversées (gauche, droite) pour une plus grande amplitude en matière de profondeur.
- Ajustement de la profondeur de 5 po (12,7 cm), soit 2,5 po (6,4 cm) devant et derrière les cannes de dossier.
- Facilement adaptable à des fauteuils plus larges (jusqu'à 2 po – 5,08 cm – plus larges que le dossier).
- Les fixations peuvent être installées et désinstallées sans être désassemblées complètement.
- Quincaillerie discrète assurant la solidité et la rigidité du dossier.
- Ajustable pour s'adapter à la rotation du bassin et du tronc.
- Convient aux cannes de dossier de 0,75 à 1 po (1,9 à 2,5 cm).
- Ajustement d'angle de 25 degrés, antérieur et postérieur.

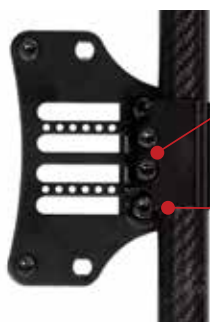

Attachez la fixation à la canne de dossier, et ajustez la hauteur et la rotation.

Ajustez la profondeur et l'angle.