



PLIANT
CARBONE

VELOCE

| UNE VIE ACTIVE AVEC STYLE

VELOCE

UNE VIE ACTIVE AVEC STYLE

Le fauteuil roulant VELOCE de Motion Composites est technologiquement loin devant, tout comme ses utilisateurs! Une conception agile, une légèreté, une rigidité et une réactivité imbattable, donnant vie à un fauteuil pliant à la fois performant et confortable. Profitant des avantages essentiels d'un système de pliage compact, le VELOCE est facile à transporter et à ajuster. Un fauteuil qui s'adapte réellement à votre vie active, toujours en mouvement.

Reconnue internationalement, Motion Composites jumelle le savoir-faire et la passion pour l'innovation afin de donner naissance à un produit unique et inspiré par vous. Visionnaires et passionnés, nous basons notre réflexion sur l'expérience.

Pour nous, un fauteuil performant améliore la vie des gens par ses composantes, son design, ses fonctionnalités et sa qualité. VELOCE est l'aboutissement de notre passion pour la performance, de notre engagement envers l'excellence et de notre vision d'une vie plus libre.

AU-DELÀ DES LIMITES!



reddot design award
winner 2019



Modèle/Ambassadeur : Joel Dembe



Je suis tellement heureuse avec mon Veloce, il convient parfaitement à mon style de vie. Depuis que je l'utilise, il m'a donné la confiance de fonder ma chaine Youtube (Wheelsnoheels), où je montre aux autres qu'il est possible d'être heureux et comblé en fauteuil roulant. Mon Veloce a voyagé à travers le monde, incluant un voyage solo de Londres à Los Angeles. Je peux maintenant affirmer avec fierté que mon fauteuil fait partie de moi.



– Gem Huwbbard, Royaume-Uni

ULTRALÉGER ET AJUSTABLE

- 12 lb – La fibre de carbone au service de la légèreté
- Des possibilités de configuration par millier

En plus de profiter d'une solidité et d'un poids sans pareil, le modèle VELOCE est entièrement ajustable pour une personnalisation idéale. La hauteur sol-siège avant et arrière, l'angle du siège et le centre de gravité peuvent être ajustés au besoin. Nos fauteuils sont reconnus pour leurs options de réglage, et le modèle VELOCE en est un bon exemple. Nous sommes fiers de dire que ce fauteuil est l'un des modèles pliants les plus légers et pratiques au monde.

PRATIQUE ET CONFORTABLE

- Idéal pour la vie active
- La facilité du fauteuil pliant et le confort du fauteuil rigide

Transferts faciles, transport pratique, le fauteuil roulant VELOCE est l'équipement parfait des utilisateurs actifs. L'innovation derrière ce modèle lui attribue tous les avantages de performance et de fonctionnalité d'un fauteuil pliant, sans sacrifier le confort et la stabilité d'un fauteuil rigide. Il se range facilement partout et une fois en action, il offre une tenue de route incomparable.

DESIGN ET AUDACE

- L'unique cadre Mantis
- Une conception attrayante et minimaliste

Avec son fougueux cadre Mantis - un cadre fermé à l'arrière et ouvert à l'avant, sa tubulure triangulaire distinctive, le VELOCE est une icône de modernité. Une finition entièrement en fibre de carbone avec des accents de couleur pour un esthétisme exceptionnel et avant-gardiste.

MANIABILITÉ ET FACILITÉ DE PROPULSION


- Conserver son énergie pour parcourir plus
- Mobile, agile et qui travaille pour vous

Une propulsion facile est un atout indéniable. Grâce au VELOCE, vous profiterez d'une grande agilité de mouvement. Le croisillon moulé entièrement symétrique, la tubulure ovale et les axes de pivot travaillent de concert pendant que le système de pliage unique maximise la rigidité et la réactivité du cadre. Une importante conservation de votre énergie au quotidien.

ATTRIBUTS UNIQUES

CADRE MONOCOQUE RIGIDE

Élimine les joints, réduit le mouvement et maximise l'efficacité

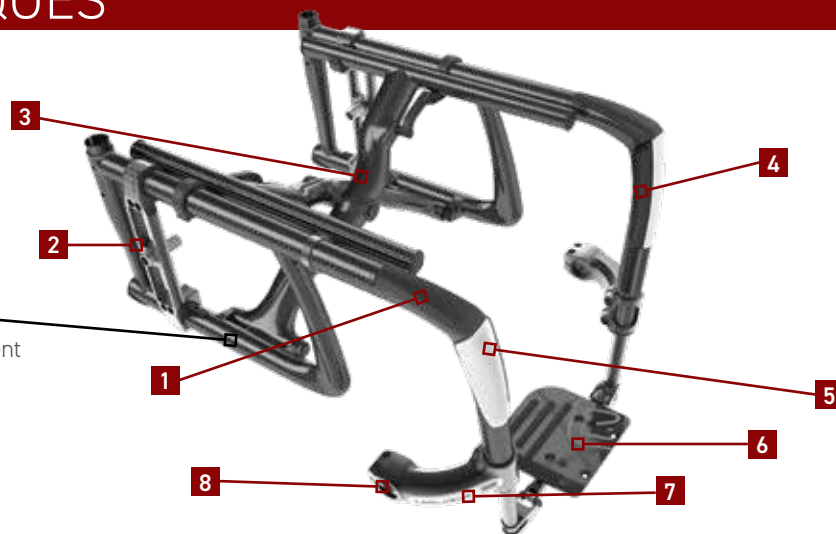

1 POIGNÉES CAOUTCHOUTÉES

Prise supérieure à haut coefficient de friction pour les transferts



2 SUPPORT DE ROUE ARRIÈRE

Permet une multitude d'ajustements, une rigidité et une réactivité maximisées



3 SYSTÈME DE PLIAGE ULTRA RIGIDE

Pour une efficacité de propulsion maximale



4 PROTECTION INTÉGRÉE

Fournit plus de confort et évite les points de pression sur les genoux



5 PROTECTION ANTICHOC

Empêche les égratignures d'une utilisation quotidienne et protège les zones vulnérables du fauteuil



6 REPOSE-PIEDS PLIABLE

Conception novatrice permettant au repose-pieds de se replier en même temps que le fauteuil



7 PARE-CHOC AVANT

Encore plus de style et une sécurité accrue



8 NIVEAUX À BULLE

Réglage rapide et précis grâce aux indicateurs intégrés et calibrés

TECHNOLOGIES



MANTIS

CADRE MANTIS

Inspiré par la rigidité des cadres fermés et l'aspect minimaliste des cadres en porte-à-faux.



T-700

FIBRE DE CARBONE T700

À HAUTE RÉSISTANCE À LA TRACTION
La fibre de carbone est l'une des matières des plus rigides et légères qui soient. Elle est également reconnue pour ses propriétés d'atténuation des vibrations.



RUF

CADRE MONOCOQUE RIGIDE

Fait d'une seule pièce, ce cadre est plus solide et requiert moins d'entretien qu'un cadre standard en deux parties. Efficacité de propulsion et légèreté optimisées.



SMC 3D

CROISILLON MOULÉ SYMÉTRIQUE 3D

Le croisillon de fibre de carbone entièrement symétrique réduit la torsion et répartit mieux l'énergie dans l'ensemble du cadre.



UFS

SYSTÈME DE PLIAGE ULTRARIGIDE

Assure une tolérance de haute précision et des axes de pivot surdimensionnés offrant la meilleure efficacité de propulsion de sa catégorie.



FVA+

PLAQUE DE MONTAGE FORGÉE VERTICALE

Permet le réglage des roues arrière le plus précis de l'industrie et maximise la rigidité et la réactivité du fauteuil.



BUBBLE

NIVEAUX À BULLE

Indicateurs intégrés et calibrés qui permettent un réglage des roues avant plus rapide et précis.



GUARD

PROTECTION ANTICHOC INTÉGRÉE AVEC PRISE SUPÉRIEURE

Empêche les égratignures à l'avant du cadre et protège les zones vulnérables que sont les extrémités inférieures. Les poignées caoutchoutées ajoutent une prise à haut coefficient de friction pour les transferts.



NEWTON

ACCESSOIRES NEWTON

Les pièces et accessoires Newton sont légers avec un style et des fonctions améliorés.

TABLEAU TECHNIQUE

CADRE	Pliable
MATÉRIAU	Fibre de carbone T700 à haute résistance à la traction
POIDS DE TRANSPORT	5,4 kg 11,9 lb (16 x 16, sans roues arrière, blocage des roues, appuis-bras, coussin de siège et anti-basculants)
POIDS DE CONFIGURATION LA PLUS LÉGÈRE	8,8 kg 19,4 lb avec blocage des roues et roues arrière
LIMITE DE POIDS	120 kg 265 lb 159 kg 350 lb—ensemble HD
LARGEUR DU SIÈGE	35,6 cm à 50,8 cm 14 po à 20 po 45,5 cm à 50,8 cm 18 po à 20 po—ensemble HD
PROFONDEUR DU SIÈGE	35,6 cm à 50,8 cm 14 po à 20 po
HAUTEUR SOL-SIÈGE AVANT	35,6 cm à 53,3 cm 14 po à 21 po (avec roues avant de 7,6 cm à 15,2 cm 3 po à 6 po)
HAUTEUR SOL-SIÈGE ARRIÈRE	34,3 cm à 51,4 cm 13 ½ po à 20 ½ po (avec roues de 55,9 cm à 66 cm 22 po à 26 po)

DIMENSIONS



LARGEUR DU SIÈGE

35,6 cm à 50,8 cm | 14 po à 20 po



PROFONDEUR DU SIÈGE

35,6 cm à 50,8 cm | 14 po à 20 po




HAUTEUR SOL-SIÈGE AVANT

35,6 cm à 53,3 cm | 14 po à 21 po



HAUTEUR SOL-SIÈGE ARRIÈRE

34,3 cm à 51,4 cm | 13 ½ po à 20 ½ po

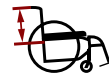

HAUTEUR DE DOSSIER

22,9 cm à 53,3 cm | 9 po à 21 po



HAUTEUR D'APPUI-BRAS

15,2 cm à 35,6 cm | 6 po à 14 po



ANGLE AVANT DU CADRE

70°, 75°, 80°, 85°, 90°



ANGLE DU DOSSIER

85° à 110°



INCLINAISON DES ROUES (CAROSSAGE)

0°, 3°, 6°



CENTRE DE GRAVITÉ

2,5 cm à 10,2 cm | 1 po à 4 po



LARGEUR TOTALE

52,7 cm min. – 80 cm max.
20 % po min. – 31 ½ po max.



LIMITE DE POIDS

120 kg | 265 lb
159 kg | 350 lb – ensemble HD

COULEURS OFFERTES

LA COULEUR EST APPLIQUÉE SUR LE PROTECTEUR. LE CADRE OFFRE UN FINI EN FIBRE DE CARBONE LUSTRÉ.



Noir



Blanc



Bleu ciel



Vert acide



Rouge Ferrari



Fuschia



Orange tangerine

AU-DELÀ DES LIMITES

Des innovateurs passionnés repoussant les limites du possible, voilà ce que nous sommes. Une ingénierie à la fine pointe de la technologie alliée à des matériaux novateurs pour créer le mouvement, voilà ce que nous faisons. Nos fauteuils roulants ultralégers sont l'écho de la passion dont font preuve les utilisateurs jour après jour, voilà ce qui nous rend fiers. Par notre approche différente et notre attitude distincte, nous visons à améliorer la vie des gens, à nourrir leur sentiment de liberté et à révolutionner la façon dont les gens perçoivent les fauteuils roulants.

APPRENEZ-EN PLUS Pour en découvrir davantage sur le VELOCE et nos autres modèles de fauteuils roulants ainsi que pour toutes autres informations concernant les produits Motion Composites, visitez le **motioncomposites.com**.



T 1 866 650-6555

F 1 888 966-6555

motioncomposites.com

0070264B-00-v5-VELOCE BROCHURE - FRENCH

